

BARD® TOUCHLESS® Plus Unisex Pre-Lubricated Urethral Catheter Kit

**Single Use Only
Sterile**

Contents of kit are sterile unless package is opened or damaged.

Contents:
Vinyl Urethral Catheter
1100cc collection bag

Caution:

Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

LATEX-FREE

BARD

C. R. Bard, Inc.
Covington, GA 30014 USA
1-800-526-4455
www.bardmedical.com

Warning: This is a single use device. Do not re-sterilize any portion of this device. Reuse and/or repackaging may create a risk of patient or user infection, compromise the structural integrity and/or essential material and design characteristics of the device, which may lead to device failure, and/or lead to injury, illness or death of the patient.

Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local, state and federal laws and regulations.

Instructions for Use:

Preparing for Catheterization:

1. Open kit and remove contents.

Male/Female Catheterization:

1. Remove cap from insertion tip while squeezing tabs. Save cap for closing the bag.
2. Slide the catheter halfway into the insertion tip.
3. **Male** - Prepare the male urethral meatus and the surrounding area with povidone-iodine swabs.
Female - Prepare the female urethral meatus by holding the outer labia apart and prep the urethral meatus and surrounding area with povidone-iodine swabs.
4. **Male** - Holding the penis, advance the insertion tip into the urethra no further than the flange base.
Female - Spread the inner labia, advance the insertion tip into the urethra no further than the flange base. Release the inner labia.

5. Place your nondominant hand on the finger control guide to stabilize catheter in urethra. With your dominant hand, grasp catheter through bag approximately 1" below the finger control guide and push catheter into urethra.
The catheter should be introduced by short, repetitive pushing motions. Repeat motions until catheter reaches bladder and urine starts to flow.

6. Allow urine to flow freely, making certain the catheter guide is elevated at least 4" above lower portion of the bag. Allow flow until bladder is empty or until bag is filled.

PRECAUTION: It is recommended that the collection bag be held. The catheter could possibly separate from the collection bag when urine increases weight of the bag.


7. Withdraw the catheter from the urethra. Remove the remaining portion of the catheter from the collection bag by pulling it through the insertion tip. **Note: The catheter is designed to pass through the insertion tip.**
8. The filled collection bag may be closed by replacing the cap over the insertion tip. Make sure the cap snaps on securely.

Specimen Collection:

To collect a specimen, obtain a sample cup/tube and alcohol wipe. Remove guide tip by pulling tab(s) upward from bag. Wipe port with alcohol. Pour specimen through port at top of bag into cup/tube.

Draining Bag:

Remove insertion tip by pulling tab(s) upward from bag. Drain urine through port at top of bag.

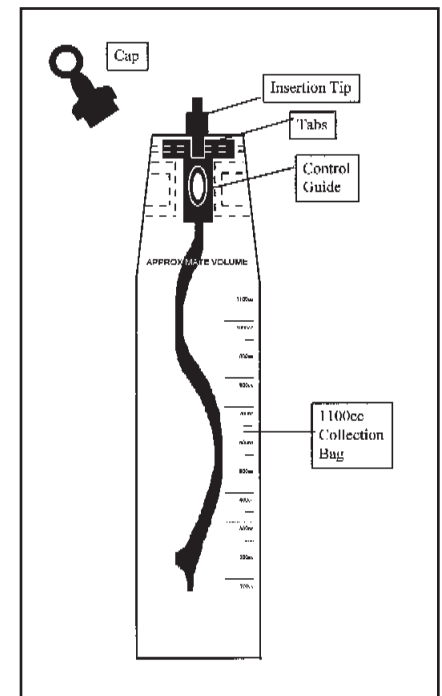

Manufactured in Mexico.
Bard and Touchless are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc.

BARD® TOUCHLESS® Plus unisex

Trousse avec sonde vésicale prélubrifiée

À usage unique
Stérile

Le contenu de la trousse est stérile sauf si l'emballage a été ouvert ou endommagé.

Contenu :

Sonde vésicale en vinyle

Poche de 1 100 cm³

SANS LATEX

Avertissement:

Selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.

Mise en garde : Ce dispositif est à usage unique. Ne résteriliser aucune partie de ce dispositif. Une réutilisation et/ou un ré-emballage peut créer un risque d'infection pour le patient ou l'utilisateur, compromettre l'intégrité structurale et/ou le matériau essentiel et les caractéristiques de conception du dispositif, ce qui est susceptible de conduire à une défaillance du dispositif et/ou à l'atteinte, la maladie ou le décès du patient.

Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales acceptées et aux lois et règlements locaux, nationaux et fédéraux en vigueur.

Mode d'emploi :

Préparation au cathétérisme :

1. Ouvrir la trousse et en sortir le contenu.

Cathétérisme chez les hommes/les femmes :

1. Retirer le bouchon de l'embout d'insertion tout en appuyant sur les languettes. Réserver le bouchon pour la fermeture de la poche.
2. Faire glisser la sonde à mi-chemin dans l'embout d'insertion.
3. **Hommes** : Préparer le méat urétral et la zone périphérique à l'aide de tampons à la povidone iodée.
Femmes : Tenir les grandes lèvres écartées et préparer le méat urétral et la zone périphérique à l'aide de tampons à la povidone iodée.
4. **Hommes** : Tout en tenant le pénis, faire avancer l'embout d'insertion dans l'urètre sans dépasser l'embase à ailette.
Femmes : Écarter les petites lèvres, faire avancer l'embout d'insertion dans l'urètre sans dépasser l'embase à ailette. Relâcher les petites lèvres.
5. Placer la main non dominante sur le guide digital pour stabiliser le cathéter dans l'urètre. Avec la main dominante, attraper la sonde dans la poche environ 2,5 cm sous le guide digital et pousser la sonde dans l'urètre.
Introduire la sonde en la poussant sur de courtes distances par petites touches répétées. Poursuivre ces mouvements jusqu'à ce que la sonde atteigne la vessie et que l'urine commence à couler.
6. Laisser l'urine couler librement, en veillant à ce que le tube de conduite de la sonde se trouve au moins 10 cm au-dessus du fond de la poche. Laisser couler jusqu'à ce que la vessie soit vide ou la poche remplie.
ATTENTION : Il est recommandé de tenir la poche. La sonde pourrait en effet se séparer de la poche sous le poids de l'urine.
7. Retirer la sonde de l'urètre. Sortir la partie restante de la sonde hors de la poche en faisant passer la sonde par l'embout d'insertion. **Remarque** : La sonde a été conçue pour pouvoir passer par l'embout d'insertion.
8. Fermer la poche remplie en plaçant le bouchon sur l'embout d'insertion. Vérifier que le bouchon est fermé hermétiquement.


Prélèvement d'échantillons :

Pour prélever un échantillon, se munir d'un béccher/tube à échantillons et d'un tampon à l'alcool. Retirer l'extrémité du guide en tirant les languettes vers le haut par rapport à la poche. Essuyer l'ouverture avec le tampon à l'alcool. Verser l'échantillon dans le béccher/tube par l'ouverture supérieure de la poche.

Vidange de la poche :

Retirer l'embout d'insertion en tirant les languettes vers le haut par rapport à la poche. Vider l'urine par l'ouverture supérieure de la poche.

Fabriquée au Mexique.
Bard et Touchless sont des marques et/ou des marques déposées de C. R. Bard, Inc.

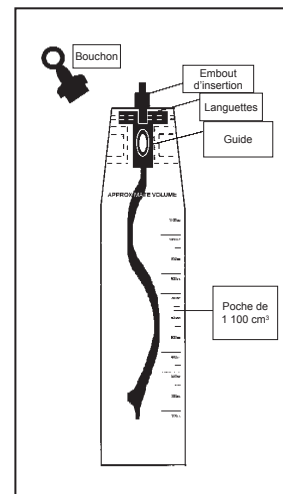

BARD® TOUCHLESS® Plus unisex

Kit de cathéter uretral prelubricado

Un solo uso
Estéril

El contenido del kit es estéril, a menos que el envase esté abierto o dañado.

Contenido:

Cathéter uretral de vinilo

Bolsa de recolección de 1100 cc

SIN LÁTEX

Advertencia:

Las leyes federales de EE.UU. limitan la venta de este dispositivo a los médicos o bajo prescripción facultativa.

Aviso: Se trata de un dispositivo de un solo uso. No reesterilizar ninguna parte de este dispositivo. La reutilización y/o el reenvasado podrían originar riesgo de infección del paciente o usuario, afectar a la integridad estructural y/o a las características esenciales de los materiales y del diseño del dispositivo, lo cual podría dar lugar al fallo del dispositivo y/o una lesión, enfermedad o la muerte del paciente.

Manipúlelo y deséchelo conforme a la práctica médica aceptada y a las leyes y normativas locales, estatales y federales pertinentes.

Instrucciones de uso:

Preparación para la cateterización:

1. Abra el kit y retire el contenido.

Cateterización masculina/femenina:

1. Retire el tapón de la punta de inserción mientras oprime las lengüetas. Conserve el tapón para cerrar la bolsa.
2. Deslice el cathéter hasta la mitad de la punta de inserción.
3. **Masculina** - Prepare el meato uretral y su área circundante usando los hisopos de yodo-povidona facilitados.
Femenina - Prepare el meato uretral femenino y la zona circundante usando hisopos de yodo-povidona, manteniendo los labios vaginales mayores separados.
4. **Masculina** - Mientras sostiene el pene, introduzca la punta de inserción en la uretra, hasta el borde de su base.
Femenina - Mientras mantiene los labios vaginales menores separados, introduzca la punta de inserción en la uretra, hasta el borde de su base. Luego suelte los labios vaginales menores.
5. Coloque su mano no dominante en la guía de control del cathéter para estabilizar el cathéter en la uretra. Con la mano dominante sujete el cathéter a través de la bolsa aproximadamente 2,5 cm (1 pulgada) por debajo de la guía de control y empuje el cathéter en la uretra.
6. La introducción deberá hacerse con empujes cortos, de manera repetitiva. Repita los movimientos hasta que el cathéter llegue a la vejiga y comience a fluir orina.
Permita que la orina fluya libremente, asegurándose de que la guía del cathéter esté elevada por lo menos 10 cm (4 pulgadas) por encima de la porción inferior de la bolsa. Permita que el flujo continúe hasta que la vejiga esté vacía o se llene la bolsa.
PRECAUCION: Se recomienda que la bolsa de recolección se mantenga sujeta todo el tiempo. El cathéter podría desprenderse posiblemente de la bolsa de recolección cuando el peso de la bolsa aumenta debido a la orina.
7. Retire el cathéter de la uretra. Remueva la porción restante del cathéter de la bolsa de recolección, sacándolo por la punta de inserción. **Nota**: El cathéter ha sido diseñado para que pase a través de la punta de inserción.
8. La bolsa llena se podrá cerrar colocando el tapón, en la punta de inserción. Asegúrese de que cierre con firmeza.

Obtención de muestras:

Para recoger una muestra de orina, obtenga una taza un tubo de muestra y una toallita empapada en alcohol. Retire la punta de inserción tirando de la o las lengüetas hacia arriba de la bolsa. Limpie el orificio con alcohol. Vierta la muestra por el orificio de la parte superior de la bolsa a la taza o el tubo.

Como vaciar la bolsa:

Retire la punta de inserción llevando la o las lengüetas hacia arriba de la bolsa. Elimine la orina por el orificio de la parte superior de la bolsa.

Fabricado en México.
Bard y Touchless son marcas comerciales y/o comerciales registradas de C. R. Bard, Inc.

